



Edwards

\*\*2022年9月改訂（第11版）  
\*2020年1月改訂（第10版）

医療機器認証番号 20400BZY01104

機械器具51 医療用嘴管及び体液誘導管  
管理医療機器 非中心循環系塞栓除去用カテーテル 10714002

## フォガティー動脈塞栓除去カテーテル

### 再使用禁止

#### 【警告】

##### 使用方法

- この製品は天然ゴムを使用している。天然ゴムは、かゆみ、発赤、蕁麻疹、むくみ、発熱、呼吸困難、喘息様症状、血圧低下、ショックなどのアレルギー性症状をまれに起こすことがある。このような症状を起こした場合には、直ちに使用を中止し、適切な処置を施すこと。
- 動脈塞栓および血栓を除去する際に過大な引っ張り力を加えないこと。  
[バルーン破裂またはカテーテルの断裂の可能性があるため。]


#### 【禁忌・禁止】

##### 使用方法

- 再使用禁止
- 再滅菌禁止
- バルーン膨張には空気を使用しないこと。  
[空気塞栓を生じる可能性があるため。]

##### 適用対象（患者）

- 天然ゴム（ラテックス）アレルギーによるアナフィラキシー様症状の経験がある患者。

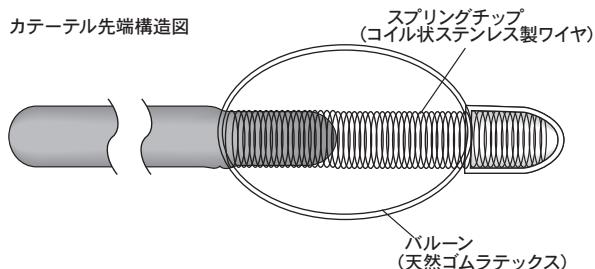

品番	120403FP E-040-3F	120803FP E-080-3F
最大膨張容量 液体 (mL)	0.2	0.2
最大膨張容量 ガス (mL)	0.6	0.6
バルーン膨張時径 (mm)	5	5
カテーテルシャフト径 (F)	3	3
カテーテル有効長 (cm)	40	80

カテーテル近位部のハブに滅菌済みの液体またはガスを充填したシリンジを接続し、カテーテルを血管内の適切な位置まで挿入して、先端部のラテックスバルーンを膨張させます。膨張させたバルーンを手前に引くことにより、閉塞物質を移動させて血管の切開部から取り出します。

#### 【使用目的又は効果】


非中心循環系の動脈塞栓及び血栓の除去。

#### 【使用方法等】

- カテーテルのハブからキャップまたはキャップとスタイルットを外します。
- 滅菌済みの液体またはガスを用いて最大膨張容量までバルーンを膨張させ、入念に点検します。膨らまない、漏れがある、または偏った膨らみ方をするバルーンは使用しないでください。  
バルーンに異常が見られなければ、シリンジを引き、陰圧をかけます。空気が完全に除かれるまでこの操作を繰り返します。
- バルーンを収縮させた状態で、血管内にカテーテルを挿入し、閉塞物質を通過する位置まで進めます（バルーン収縮時最大径 (F) : 120403FP/E-040-3F:4.3、120803FP/E-080-3F:4.3）。
- カテーテルを適切な位置に挿入したら、滅菌済みの液体またはガスでバルーンを膨張させます。動脈壁にバルーンが接触した感触が得られた時点でのバルーンの膨張を止めます。
- 穏やかにカテーテルを引き抜きながら、閉塞物質を除去します。抜去中、バルーンの膨張容量を調節することで、動脈径の変化に応じてバルーン径を合わせることが重要です。

#### \*\*【形状・構造及び原理等】

本品はシングルルーメンタイプのバルーン付カテーテルです。本品は、天然ゴム、ポリ塩化ビニル、ポリアミド樹脂、カーボンブラック、および、ウレタン系接着剤またはエポキシ系接着剤を使用しています。なお、本天然ゴムには、添加剤としてウシの乳に由来する微量のカゼインを使用しています。

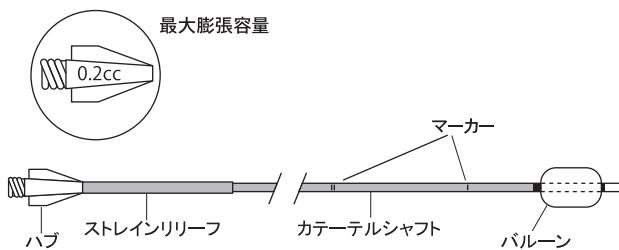

本品のバルーン・インフレーション部位にはコイル状のステンレス製ワイヤを用いており、その部位の強度を保持しています。

### <使用方法等に関連する使用上の注意>

- \* ・血管拡張器として使用しないでください。
- \* ・動脈系以外に使用しないでください。
- \* ・摘除に過大な引っ張り力を要する可能性のある血栓（繊維性、粘着性、または石灰化したもの（例えば慢性血栓や動脈硬化性プラーク））を使用しないでください。
- ・バルーン膨張用ルーメンを開塞させてしまう可能性があるため、粘性・粒子性の高い造影剤は、バルーンの膨張用として使用しないでください。
- ・バルーン膨張時の過膨張を防止するため、表記されている最大膨張容量を満たす、可能な限り最小のシリンジを使用してください。
- ・バルーン最大膨張容量を超えないよう、各膨張の前には必ずシリンジ内の液体の量を確認してください（仕様表参照）。
- ・バルーン膨張にガスを用いる場合に推奨される二酸化炭素ガスはバルーン壁を通して拡散するため、膨張容量を頻繁に調節する必要がありますので注意してください。
- ・動脈内壁における側壁への圧力とずり応力を最小限に抑えるために、閉塞物質を除去するために必要な最小の膨張バルーン径で操作を行ってください。
- \*\* ・推奨する最大引っ張り力を超えないでください（バルーン膨張時最大引っ張り力：120403FP/E-040-3F:0.3kgf、120803FP/E-080-3F:0.3kgf）。
- ・高度石灰化や複雑な蛇行など、血管状態によってはバルーンが破裂・離脱する可能性がありますので慎重に扱ってください。
- ・カテーテルを患者から抜去した際に、破断や欠損がないか確認してください。なお、バルーン破裂が認められた場合は、コイル状のステンレス製ワイヤの有無を併せて確認してください。

### \* 【使用上の注意】

#### 重要な基本的注意

- \* 1. 血管損傷、バルーン破裂またはカテーテル先端チップの離脱の発生を最小限にするため、バルーン最大膨張容量および最大引っ張り力を超えないでください。
- \* 2. バルーン膨張時には、液体やガス注入による抵抗を感じます。抵抗を感じない場合、バルーン破裂が疑われます。バルーンの膨張を止め、カテーテルを抜去してください。
- 3. MRI情報  
本品についてはMRI適合性に関する試験を実施しておりません。

#### 不具合・有害事象

##### 重大な有害事象

- ・局所または全身性感染症
- ・局所的血腫
- ・内膜損傷
- ・動脈解離
- ・穿孔または血管破裂
- ・出血
- ・動脈血栓
- ・血液凝固物または動脈硬化性粥腫の遠位部塞栓
- ・空気塞栓
- ・瘤
- ・動脈攣縮
- ・動静脈瘻の形成
- ・離脱を伴うバルーン破裂またはカテーテル先端チップ離脱による遠位部塞栓

温度：0~40°C、湿度：5~90%RH

有効期間

27ヶ月

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

エドワーズライフサイエンス株式会社

電話番号：03-6894-0500（顧客窓口センター）

設計を行う外国製造業者（国名）：

エドワーズライフサイエンス社（米国）

Edwards Lifesciences LLC

Edwards、エドワーズ、Edwards Lifesciences、エドワーズライフサイエンス、定型化されたEロゴ、FogartyおよびフォガティーはEdwards Lifesciences Corporationの商標です。その他の商標は全てそれぞれの商標権者に帰属します。

### 【保管方法及び有効期間等】

#### 保管方法

涼しく乾燥した場所に保管してください。